

# ELSODENT

## 5 ml

10. Placer ensuite le composite dual de votre choix (ex : CORE D) suivant le mode d'emploi du produit.

#### Note

En cas d'utilisation d'Innocem pour sceller le tenon, il n'est pas nécessaire d'employer Healbond MP. Activateur car Innocem contient déjà l'activateur.

**Réparation intra-buccale de composites de restauration indirectes, céramo-métalliques, tout céramique**

#### Réparation composite indirecte

Rendre rugueux la partie fracturée à réparer (sablage), puis nettoyer à l'alcool.

Prothèse céramo-métallique et tout céramique

1. Sabler le métal, si il est apparent. Nettoyer ensuite avec de l'alcool. Sécher avec un air sec exempt d'eau et d'huile.
2. Mordancer la céramique avec de l'acide hydrofluorique à 9.8%.
3. Rincer ensuite abondamment pendant 15 secondes et sécher avec un air exempt d'eau et d'huile.
4. Appliquer Healbond MP, adhésif Universel en suivant le mode d'emploi et attendre 15 secondes.
5. Sécher légèrement pendant 5 à 7 secondes jusqu'à ce que le solvant contenu dans Healbond MP se soit évaporé.
6. Photopolymériser l'adhésif pendant 10 secondes.
7. Dans le cas d'une prothèse céramo-métallique, si le métal est apparent, appliquer un opaqueur et polymériser pendant 20 secondes en se référant au mode d'emploi du fabricant.
8. Dans tous les cas, utiliser ensuite le composite de votre choix, en se référant au mode d'emploi du fabricant.

#### Stockage et durée de vie

Ne pas exposer aux rayons du soleil directs ou à des sources de chaleur. Conserver à une température inférieure ou égale à 25°C. Dans ces conditions, la durée de vie du Healbond MP est de 24 mois. Ne pas conserver Healbond MP près d'un feu ou d'étincelles.

#### Présentation & références

BMP-5 – Adhésif Universel, flacon de 5ml


#### Note importante

- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
- Un stockage à une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.

#### Délégation de responsabilité

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

Adhésif universel  
Universal bonding  
Universal Adhäsiv  
Universeel adhesief  
Universal adhesivo

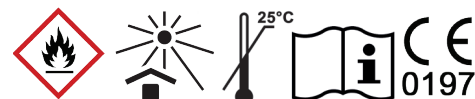

## Healbond MP

G-PHARMA - 35, avenue du Gros Chêne - B.P. 10279 HERBLAY  
95617 CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE  
elsodent@elsodent.com - www.elsodent.com



# ELSODENT

## 5 ml

Adhésif universel  
Universal bonding  
Universal Adhäsiv  
Universeel adhesief  
Universal adhesivo



## Healbond MP

G-PHARMA - 35, avenue du Gros Chêne - B.P. 10279 HERBLAY  
95617 CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE  
elsodent@elsodent.com - www.elsodent.com

CE  
0197

Depuis 12-2017

Date de révision : 07-2018

Healbond MP  
ELSODENT

G-PHARMA  
35, avenue du Gros Chêne  
B.P. 10279 HERBLAY  
95617 CERGY-PONTOISE Cedex FRANCE  
elsodent@elsodent.com  
www.elsodent.com

